

# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®



Lingettes prêtes à l'emploi, pour la désinfection rapide et le nettoyage des dispositifs médicaux, en viscose 100% biodégradable.

## Caractéristiques principales

- Solution d'imprégnation formulée sans alcool
- Temps de contact : 1 - 5 minutes
- Lingettes en viscose - 100% biodégradable
- Sans parfum ni autre substance allergène
- Idéal pour le traitement du fauteuil dentaire
- Dimensions : 180 x 200mm
- Marqué CE conformément à la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux
- Pack distributeur de 100 lingettes
- Certifié VAH/DGHM



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genève | Suisse  
Tél + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com  
[www.usfhealthcare.com](http://www.usfhealthcare.com)



# ■ Foam 2 Wipes Unisepta®

## Protocole d'utilisation

### Avant utilisation

Porter des gants appropriés.



Retirer la lingette du sachet.



Appliquer la lingette sur la zone à traiter.



Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si le dispositif médical entre en contact avec la peau ou les muqueuses.




S'assurer que le sachet est bien refermé après chaque utilisation.

### Précautions

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Conserver entre +5°C et +35°C. Usage professionnel uniquement. Dispositif médical de classe IIa (conformément à la directive 93/42/CEE modifiée, relative aux dispositifs médicaux).

## Spectre d'activité†

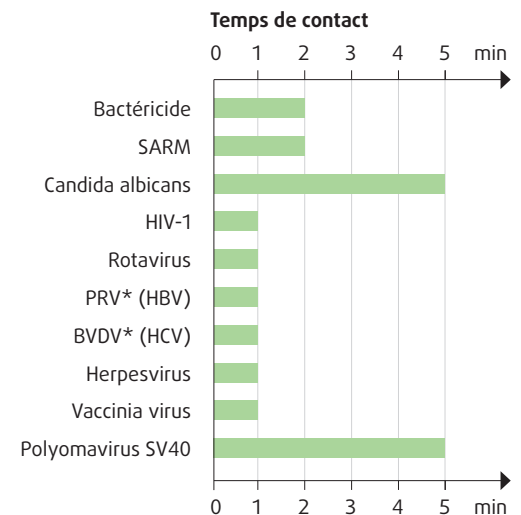

\* PRV : Virus modèle de l'Hépatite B

\* BVDV : Virus modèle de l'Hépatite C

† Spectre d'activité de la solution d'imprégnation

L'Institut Robert Koch (RKI) recommande l'utilisation de désinfectants avec une activité virucide limitée pour interrompre la chaîne de l'infection. Selon le RKI, une activité virucide limitée (efficace sur les virus enveloppés) correspond à une activité sur Vaccinia virus et BVDV.

### Conforme aux normes européennes

La solution d'imprégnation est :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697

SARM : EN 13727, EN 13697

Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697

Actif sur virus selon EN 14476

### Composition

100 g de la solution d'imprégnation contiennent : 0,30 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients.

### Données physiques

Lingette en viscosse (spunlace non tissé 50gr/m<sup>2</sup>), 100% biodégradable.

Couleur : Lingette blanche

Parfum : Sans parfum

Conservation : 2 ans (non ouvert)

### Conditionnement

	100 lingettes	150 lingettes
Paquet	✓	



**ECOEngage**  
Our Ecological Engagement



**USF Healthcare**  
Unident • Steridine • Farmec