


# Abena Light Super - n°4

## INCONTINENCE

ABENA<sup>®</sup> light



20 x 42 cm

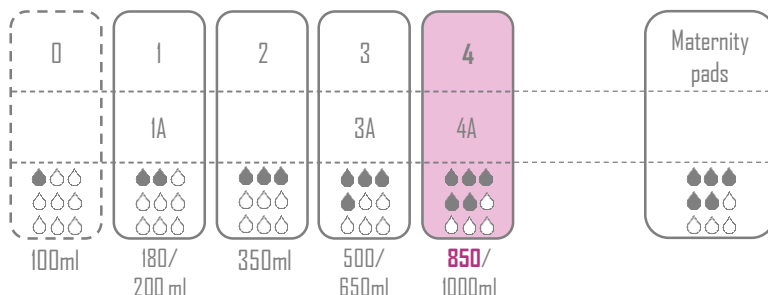

Spécial Post-accouchement

## UTILISATEURS

AUTONOME

INCONTINENCE LÉGÈRE

POST GROSSESSE



### Top Dry - Effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile de surface. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi au voile de surface du change de rester sèche.



### Forme anatomique

Les protections Abena Light ont été conçues pour s'adapter à la morphologie des utilisateurs, limitant ainsi le risque de fuites.



### Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



### Bords anti-fuites

Les bords anti-fuites hydrophobes sont situés au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.



### Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.


## DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Couche d'acquisition	Couche d'acquisition et de distribution en non-tissé
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Voile de surface	Voile de surface gaufré
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates



# Abena Light Super - n°4

## DIMENSIONS PRODUIT

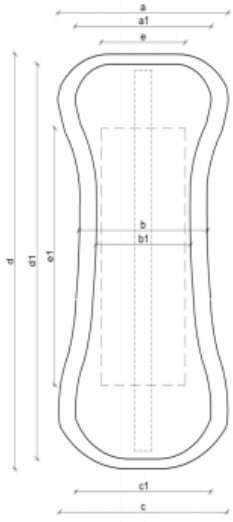

d	Longueur	420 mm
a	Largeur, devant	200 mm
c	Largeur, arrière	200 mm
b	Largeur, entre-jambes	145 mm

### Cœur absorbant

dl	Longueur	390 mm
al	Largeur, devant	160 mm
cl	Largeur, arrière	160 mm
bl	Largeur, entre-jambes	100 mm

## ABSORPTION

Poids produit : 36 g

Test Rothwell ISO 11948-1	850 ml
---------------------------	--------



Ecocert Nordic Swan  
Produits respectueux de  
l'utilisateur et de son  
environnement



Testé  
dermatologiquement  
Produits sans risques  
d'irritation



Meilleur Produit Eco 2019  
Récompensé « Meilleur Produit  
Eco 2019 » par un jury de  
100 testeurs



Label FSC  
Cellulose provenant de forêts  
responsables



Dispositif médical  
Classe I 93/42/CEE



ISO 9001  
ISO 14001

OHSAS 18001:2008

Management de la santé  
et de la sécurité au  
travail

GMP

Good Manufacturing  
Practices



## DONNÉES LOGISTIQUES



Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
9	30	270	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
9	1,080 m		
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 382208		57 03538 445491	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
73,6 x 39,6 x 31,2 cm	10770 g	9990 g	24 x 31 x 13 cm

## PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme  
complète de soins de la  
peau et d'essuyage  
corporel ABENA

[www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

