
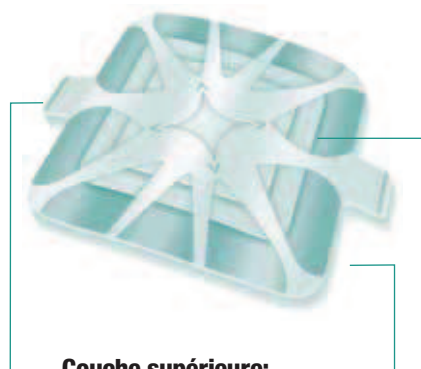


3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Pansement mixte mousse et hydrocapillaire !

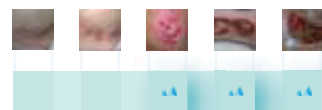

Couche supérieure:

Tegaderm HP : film en polyuréthane semi-perméable (HP = Haute Performance) qui laisse évaporer très rapidement l'exsudat absorbé au niveau de la plaie. Ceci diminue fortement le risque de fuite et garantit une barrière contre une contamination.

Couche intermédiaire :

Les particules emprisonnées dans la couche non tissée ultra-absorbante garantissent une absorption rapide et un haut pouvoir de rétention hydrique.

Couche inférieure :

Coussin de mousse polyuréthane conforme. Ne gonfle pas mais offre une grande capacité d'absorption.

Indications



- Pansement primaire pour les lésions produisant un exsudat moyen à abondant



- Recouvrement pour les pansements de colmatage (comme les compresses de gaze ou alginates)

Avantages



- **Système d'application unique : simple à mettre en place**

Le système d'application breveté permet de positionner très simplement le pansement à une seule main et évite qu'il ne s'enroule ou se décolle. Grâce aux grandes languettes latérales, le pansement s'applique aisément, même avec des gants.



- **Combine les avantages d'un pansement mousse et d'un pansement hydrocapillaire**

- En raison de sa très grande capacité de prise en charge hydrique (évaporation + absorption des exsudats), Tegaderm Foam Adhesive se révèle particulièrement adapté pour soigner les plaies suintant abondamment.
- La couche intermédiaire non tissée super-absorbante assure une bonne rétention de l'exsudat absorbé au niveau de la plaie, ce qui permet d'éviter la macération de la plaie et de ses pourtours.
- Le coussin de mousse polyuréthane permet une absorption très rapide de la charge hydrique de la plaie, laquelle est transmise immédiatement à la couche intermédiaire non tissée.

- **Applicable dans de nombreuses indications, y compris en cas de plaies présentant un risque d'infection accru**

Grâce à sa couche supérieure Tegaderm HP, Tegaderm Foam Adhesive est un pansement mixte mousse-hydrocapillaire de haute performance offrant un très grand pouvoir perspirant ; il peut également être utilisé en cas d'ulcères artériels et diabétiques (sous surveillance médicale).

- **Gamme étendue**

Tegaderm Foam Adhesive est disponible en plusieurs formes et dimensions.

