


10 rue du commerce
67340 INGWILLER

☎ 03 88 02 10 15 📠 03 88 02 10 19


FICHE TECHNIQUE

THERMOMETRE NEXTEMP - TRAXIT

Incassable & Pratique
Réutilisable monopatient
Ecologique sans piles
Sans calibration

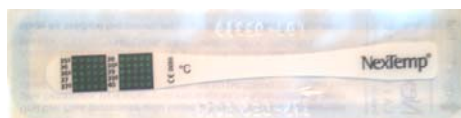

Réf. 41101 - 42102 **Caractéristiques techniques**

Type de prise	Buccal – Axillaire – anal avec réglette – pas adapté pour les bébés et moins de 2 ans
Gamme de prise de mesure	De + 35,5°C à + 40,4°C
Précision	± 0.1°C
Structure	Bande en plastique contenant 50 cavités disposées sur une double matrice située à l'extrémité sensible du thermomètre
Sécurité	Les cristaux liquides utilisés sont non toxiques, non irritants et non allergisants
Réversibilité	Ce thermomètre est conçu pour redevenir automatiquement réutilisable après quelques minutes, mais son usage est individuel ; il est possible de prendre plusieurs fois de suite la température d'un même individu.
Date de péremption	Ces thermomètres sont valables 5 ans à compter de leur fabrication. Leur date de péremption est indiquée sur la boîte.
Conditionnement	Chaque boîte contient 100 thermomètres en pochettes individuelles
Temps de mesure	En fonction du site de prise : 1 mn buccal et 3 mn axillaire
Garantie	2 ans
Version retardateur d'affichage	Ce modèle permet un maintien de l'affichage durant 1mn 
Version Traxit	Conçu spécialement pour les prises axillaires, il reste collé pendant plus de 48 heures, et permet dès 3 minute après la pose, une lecture instantanée à tous moments : Gain de temps / autorise un suivi toutes les 10 minutes. Colle hypoallergénique – se jette après usage

Sous réserve de modifications techniques - révision – 03/2016