


Fauteuils coquilles pour personnes dépendantes accompagnées

Une intégration parfaite :

- du maintien*
- de l'aide au transfert du patient*
- des déplacements*



Selectis

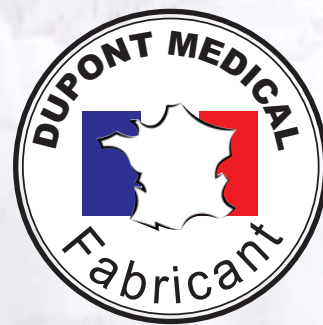

Integra

CE

Selectis

Pour un usage à dominante
extérieure avec déplacements

Base roulante de type VHP



Roues
arrière 12,5"
(32 cm)
à bandages.

Roues avant 6"
(15 cm) à bandages,
pivotantes sur 360°.

Selectis M

Inclinaison mécanique de la coque par vérin et gâchette.



Inclinaison aisée grâce à la forme de la barre à pousser et à l'emplacement réglable de la gâchette.

Selectis Posture

Inclinaison manuelle de la coque + repose-jambes inclinable indépendamment et manuellement par levier

Levier d'inclinaison du repose-jambes par vérin à gaz



NOUVEAU



Selectis M.T.

Inclinaison mécanique de la coque par gâchette et assise électrique de relevage et de transfert debout intégrée, pilotée par télécommande.



Inclinaison aisée grâce à la gâchette et la poignée à pousser ergonomique.



Freinage centralisé au pied à l'arrière.



Selectis E.T.

Inclinaison électrique de la coque et assise électrique de relevage et de transfert debout intégrée, pilotées par télécommande.



Une seule télécommande pour les 2 fonctions électriques, n'autorisant l'inclinaison de l'assise que si la coquille est revenue en proclive maximale.



Integra

Pour un usage à dominante intérieure même dans les espaces exigus

Pied avec roues de \varnothing 125 mm à haute qualité de roulage

Une roue directionnelle pour l'aide aux trajectoires rectilignes.



Maniabilité exceptionnelle (toutes les roues pivotent intégralement sur 360°).

Integra M

Inclinaison mécanique de la coque par vérin et gâchette.

Inclinaison aisée grâce à la forme de la barre à pousser et à l'emplacement réglable de la gâchette.



Integra Posture

Inclinaison manuelle de la coque + **repose-jambes inclinable indépendamment et manuellement** par levier

Levier d'inclinaison du repose-jambes par vérin à gaz



NOUVEAU



Integra M.T.

Inclinaison mécanique de la coque par gâchette et **assise électrique de relevage et de transfert debout** intégrée, pilotée par télécommande.

Inclinaison aisée grâce à la gâchette et la poignée à pousser ergonomique.



Integra E.T.

Inclinaison électrique de la coque et **assise électrique de relevage et de transfert debout** intégrée, pilotées par télécommande.



Une seule télécommande pour les 2 fonctions électriques, n'autorisant l'inclinaison de l'assise que si la coquille est revenue en proclive maximale.



L'assise électrique d'aide au transfert debout :

Parce que le transfert du patient est souvent un problème pour lui-même, pour son entourage et pour les soignants (les Troubles Musculo Squelettiques des personnes accompagnantes ou soignantes sont une réalité du quotidien), «**l'assise d'aide au transfert**» facilite la manutention du patient en évitant le portage pur et simple.



En version M.T. :

l'assise d'aide au transfert ne peut être activée que si la coquille est en proclive maximale, grâce à un capteur de sécurité.

En version E.T. :

une télécommande unique : pas de confusion possible, l'aide au transfert ne peut être activée que si la coquille est en proclive maximale.

Options disponibles



Tablette
ventrale



Alimentation par batterie
rechargeable, livrée avec
chargeur



Tablette
thermoformée
unilatérale



Tige porte
sérum
avec support



Appui-tête
ergonomique
à oreillettes



Assise mousse visco-élastique
insérée dans une housse de la
même couleur que le fauteuil
(sur recommandation médicale
spécifique)



Coussin standard
de positionnement
hanches / genoux
(sur recommandation médicale
spécifique)

Des matières et des couleurs actuelles

CHOCOLAT / PISTACHE
(appui-tête chocolat)




Garniture
«façon cuir»,
imperméable,
fongicide
et bactéricide

CHOCOLAT / BEIGE
(appui-tête chocolat)




Poche de rangement de série sur tous les modèles à l'arrière du dossier.

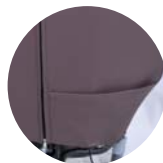


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DIFFERENTS MODELES

largeur
d'assise

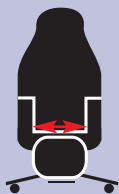


390 mm
420 mm
450 mm
480 mm
510 mm

profondeur
d'assise

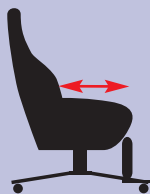


Type M : 410,
440 ou 470 mm
**Types MT, ET
et Posture** :
440 mm

hauteur
accoudoirs

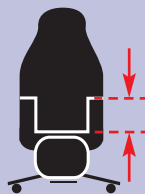

**Type M et
Posture** :
230 mm
Types MT et ET :
200 mm

hauteur d'assise
(avec coussin de 7 cm)

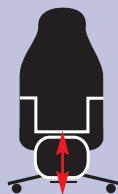


Type M : 450, 490
ou 530 mm
Types MT et ET :
480, 520
ou 560 mm
Posture : 490 mm
ou 530 mm

Inclinaison
de la coquille



Types M et MT
: -3° et + 28°
Type ET : -2° et + 25°
Posture :
-6° / + 28°

Inclinaison de
l'assise de transfert
debout seule

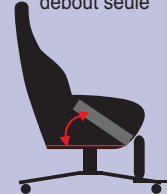


Types MT et ET :
+ 32°

Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez-vous référer au guide d'utilisation et/ou à la fiche de prescription du dispositif.

Les réglages usine sont faits de façon à correspondre à la taille du patient sélectionnée sur la fiche de prescription. La hauteur d'assise est toujours modifiable ensuite si nécessaire par le distributeur et selon les modèles.

largeur hors-tout
Integra

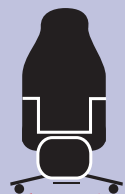


de 680 à 720 mm

longueur hors-tout
Integra (ss palette)



780 mm

largeur hors-tout
Selectis

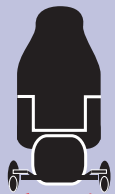

de 700 à 720 mm

longueur hors-tout
Selectis (ss palette)



890 mm

poids
des fauteuils



Integra : à partir de 29 kg
Selectis : à partir de 29 kg

poids maxi
utilisateur



120 kg

Les fauteuils coquilles sont des dispositifs médicaux nécessitant une prescription médicale. Ils sont destinés à des patients dans l'impossibilité de se maintenir en position assise sans soutien. Dans tous les cas, le fauteuil doit être adapté et configuré par un prestataire de services à domicile.

Cotes ± 10 mm / angles ± 1°